

医用画像運用に必要な機能を余すことなく凝縮
外来診療でも健診業務でもシームレスな運用を実現する軽快PACS

Extage **REBIRTH-S**

レビルス



Extageレベルス-Sとは…

間断なく送られる検査を効率的に処理/配信することに加え、MWM、健診読影、レポートサーバーまでを内包する、省スペースで投資対効果に優れた医用画像サーバーです。



Extage REBIRTH-S

レビルス

特長


- 1 サーバーOSにはLinuxを採用。安定性抜群、動作が軽く堅牢で、高価なハードウェアを必要としません。
- 2 クライアントソフトは、画像参照と紹介用CD作成などの機能を備えたProビューワーと、画像参照に特化したWebビューワーからお選びいただけます。Webビューワーは院内の既存PCでもご利用いただけます。
- 3 心電計などの波形データをMFERデータとして取り込み、表示することができます。
- 4 紹介状などの文書データもそのまま取り込み可能。検査に関連するデータを一元管理できます。
- 5 院内のタブレット端末からも検査画像の参照が可能です。

ビューワー

- 直観的な操作が可能、どなたでもすぐに使い始められます。
- 用途に合わせた最適なモニター構成が選べます。
- 検査リストも画像表示も、自由度の高いレイアウト設定が可能です。
- 読影を支援する多彩な機能・設定を有しています。

- ◆ 過去画像自動表示設定
- ◆ MPR画像、オブリーク画像、MIP画像作成
- ◆ スライス位置自動同期
- ◆ マルチフレーム動画再生
- ◆ 整形外科向け計測ツール
- ◆ コストパフォーマンスに優れた簡易マンモビュー

- 紹介用CDの作成、他院CDの取り込みを簡単に行えます。
- 隣接した電子カルテ端末から検査画像を開く画像連携が可能です。
- イメージャー、紙プリンターへの出力に対応しています。

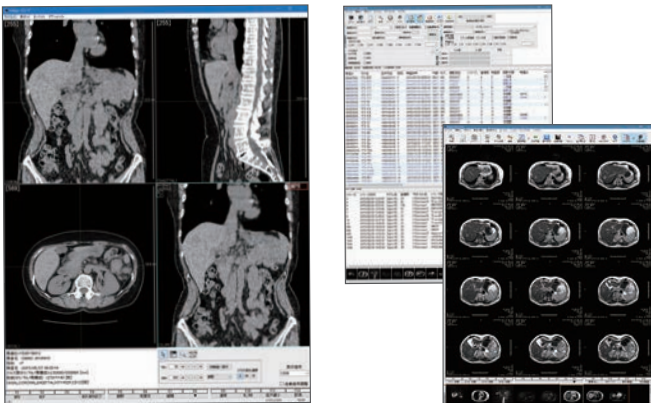


健診サポート

- 予約情報の取り込み・マッチングから、読影、所見入力/確定まで、健診業務をトータルにサポートします。
- 「異常なしを登録」→「次の検査画像を表示」→「過去画像の同時表示」をひとつの操作で行えるよう設定するなど、スムーズな連続読影を実現します。
- 読影画面上に前回の読影結果やコメントを表示。さらに前回所見がある場合には、強調表示やピープ音で読影者の注意を喚起、見逃し防止のセーフティ機能も搭載しています。
- 読影依頼先にレビルスがなくても、レビルスのレポートフォーマットにレポート入力を行えるオフライン読影機能を備えています。

レポート機能

- レポートサーバーをレビルス-S自体に内蔵しているため、シームレスな運用はもとより、ビューワー上で過去所見を参照するなど一体型ならではの機能を備えています。
- 読影依頼機能では読影者を指定できます。
- 部位ごとにテンプレートの作成が可能です。
- 選択形式で入力を簡便化した内視鏡専用レポートもご用意しています。

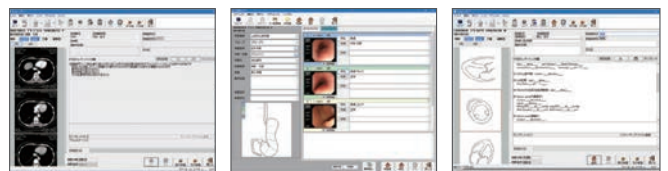


MWMサーバー機能

- MWMサーバー機能を内蔵していますから、MWM専用ハードウェアをご用意いただく必要はありません。
- 装置の振り分け・部位連携を行えます。
- 上位システムと連携を行わないケースでは、予約の作成も可能です。
- MWMができない装置は、オーダーと画像をマッチングし紐づけて管理できます。

※記載の機能はオプション機能を含みます。

◆システム構成例

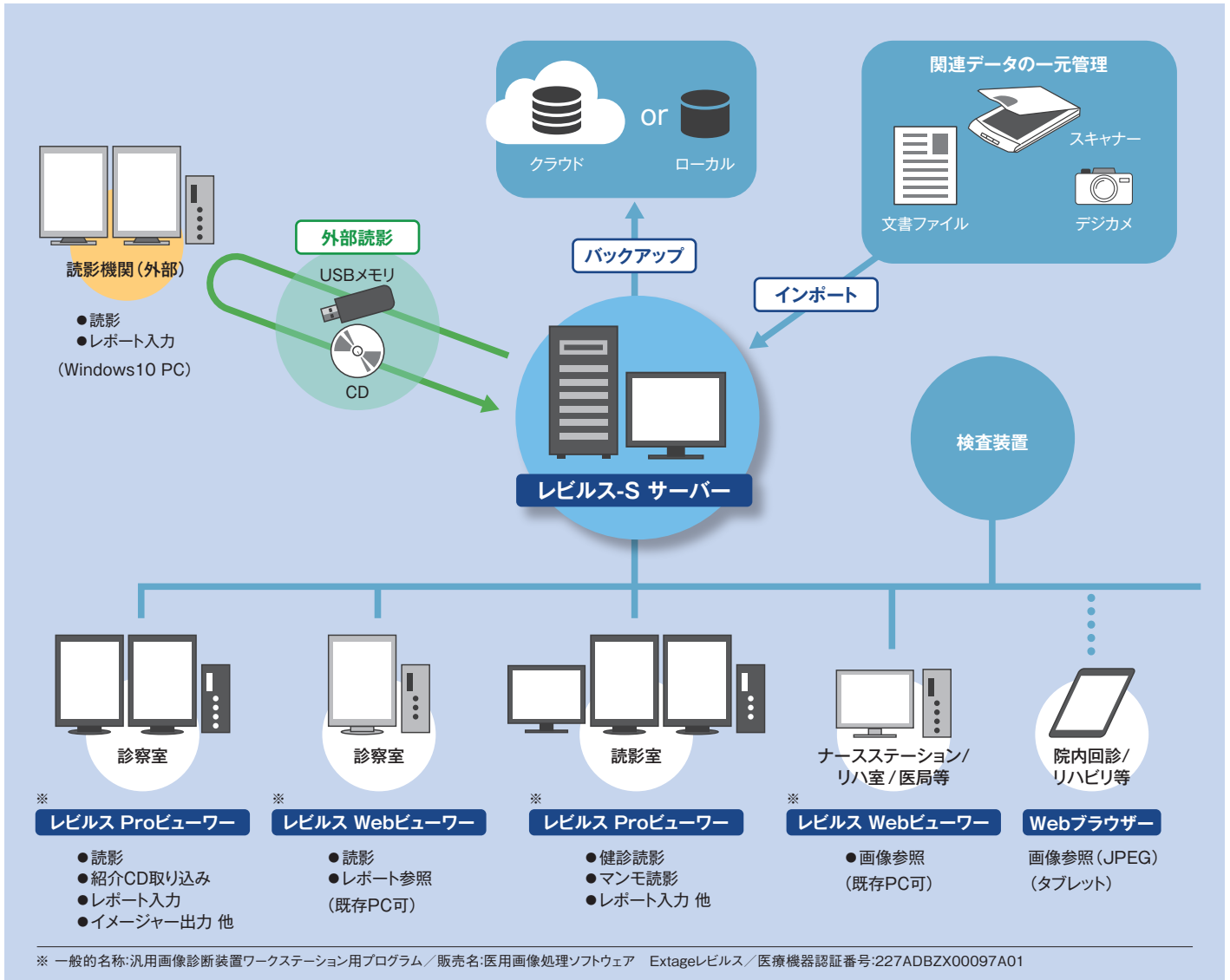

◆システム要件

Extage REBIRTH-S			
	サーバー	レビリスProビューワー	レビリスWebビューワー
CPU	Intel Xeonプロセッサ	Intel Core i3以上	Intel Dual Coreプロセッサ以上
OS	Linux	Windows10	Windows10
メモリ	4GB以上	4GB以上	2GB以上
ハードディスク容量(データ用)	4TB以上	—	—
ハードディスク構成(データ用)	RAID1/RAID5/RAID5+1/RAID6	—	—
光学ドライブ	DVDマルチドライブ	DVDマルチドライブ	DVD ROMドライブ
モニター	17インチ以上のカラーモニター	17インチ以上のカラー/モノクロモニター、スクエア型/ワイド型、2M/3M/5M等	

※サーバー及びProビューワーはシステム販売となります。Webビューワーは院内の既存PCにインストールできます。

●販売元

JPD 日本ポラデジタル株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島2-16-10 MASSビル 1F
TEL:03-6801-2331 FAX:03-6801-2330
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-2-9 翁ビル 4F
TEL:06-6130-9500 FAX:06-6130-9501

※記載されているすべての社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
※予告なく仕様は変更となることがあります。
※価格につきましては、取り扱い販売店にお問い合わせください。

インターネットでも製品情報をご紹介します。 <https://www.poladigital.co.jp/>

●お問い合わせは